


SV601 Портативный микроскоп

Руководство пользователя

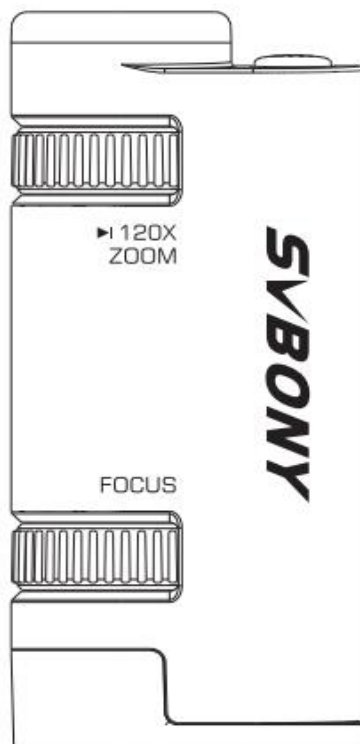

Контактные данные:

Официальный сайт: <https://svbony.com.ru/>

Twitter: @AliSvbony

Facebook: @Svbony Ali

VK: @Svbony Zhao




Сделано в Китае

Описание

Большое спасибо за покупку портативного микроскопа SVBONY SV603 (SV603). Перед использованием SV603, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя, чтобы узнать больше о функциях и навыках работы. Это позволит вам получить более приятные впечатления.

Внимание

Прочтите это руководство перед использованием портативного микроскопа SV603.

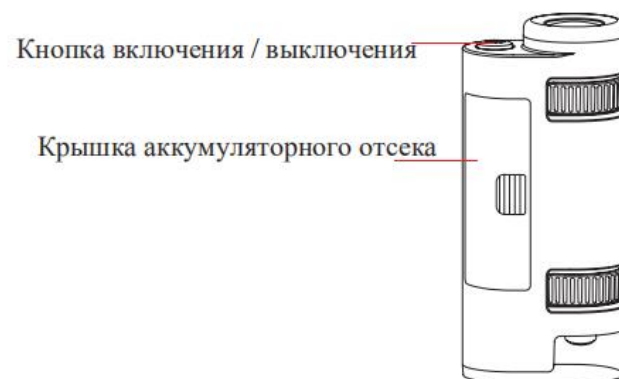

Кнопка включения / выключения

Крышка аккумуляторного отсека



Окуляр

Кольцо зума 60x-120x

Кольцо фокусировки

Объектив


Светодиодный свет

Микроскопа аксессуары



Установка батарей

Поскольку портативный микроскоп SV603 имеет большое увеличение (60-120x), если освещение микроскопа не включено, он может быть слабым и повлиять на эффект наблюдения, поэтому рекомендуется установить аккумулятор и включить освещение.

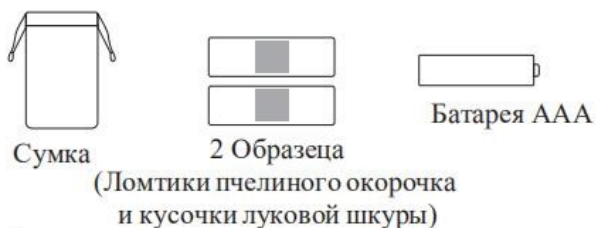


1. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
 2. Вставьте 1 батарейку AAA.
 3. Установите крышку батарейного отсека в исходное положение.
 4. Включите светодиодный индикатор. Примечание: Светодиодная подсветка имеет 3 уровня: слабое освещение, сильное освещение и выключение. Пользователи могут выбирать различную интенсивность света в соответствии со своими потребностями.
- Портативный микроскоп SV603 содержит 2 образца в упаковке. Выберите один образец, чтобы начать наблюдение. Выполните следующие действия:
1. Поместите образец лицевой стороной вверх и горизонтально на плоский стол. Положите лист белой бумаги с гладкой поверхностью под срез для лучшего восприятия.
 2. Направьте линзу объектива микроскопа на образец и аккуратно поместите его на секцию, чтобы загорелся светодиод.
 3. Совместите один глаз с окуляром для наблюдения. Если образец не наблюдается, вы можете следить за направлением отклонения, медленно

отрегулируйте до нужного положения.

4. Отрегулируйте кольцо фокусировки, рекомен дуется начать наблюдение с наименьшим увеличением 60x. Поверните кольцо фокусировки, пока изображение не станет четким.

Примечание: Не сжимайте с силой секцию образца во время наблюдения, чтобы не повредить изделие или секцию.

5. Пожалуйста, выключите светодиоды вовремя после наблюдения.

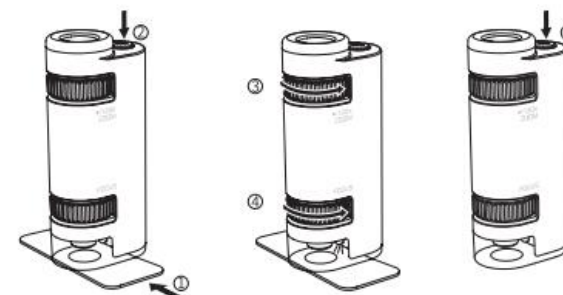

Характеристики

Название: Портативный микроскоп SVBONY SV603

Рельеф глаз: 10 ~ 14 мм

Модель: SV603

Поле зрения лайнера: 1,3 ~ 1,9 мм

Мощность увеличения: 60x-120x

Освещение: Светодиодные

Тип батареи: Батарея AAA 1,5 В

Переключатель освещения: Кнопка включения / выключения

Длина / Ширина / Высота: 40x25x89 мм

Вес нетто: 33,5 г



Предупреждение

1. Никогда не используйте SV603 для прямого наблюдения за солнцем или другими ярко светящимися объектами, чтобы не нанести непоправимый вред вашим глазам.
2. Никогда не смотрите прямо на встроенный светодиодный светящийся корпус этого продукта с близкого расстояния, чтобы избежать дискомфорта для глаз или боли.
3. Если продукт не используется в течение длительного времени, извлеките аккумулятор и храните его в безопасном месте, чтобы избежать протечки

аккумулятора и повреждения продукта.

4. Использование этого продукта в течение длительного времени приведет к его нагреву, что является нормальным явлением.
5. Этот продукт содержит мелкие детали. В целях безопасности вашего ребенка, когда он предоставляется вашему ребенку, родители должны сопровождаться в течение всего процесса. После использования храните продукт в недоступном для детей месте.

Защита и обслуживание продукта

Если ваш микроскоп SV603 используется и хранится должным образом, он может прослужить вам годы надежной службы.

1. Защитите микроскоп, держите его подальше от ударов, используйте его в пределах движущихся частей и не применяйте грубую силу.
2. Защищайте линзы микроскопа и кладите их в защитный пакет, когда они не используются, во избежание столкновений.
3. Старайтесь хранить микроскоп в сухом и прохладном месте.
4. При длительном хранении поместите микроскоп в пластиковый пакет или герметичный контейнер с влагопоглотителем внутри.
5. Пожалуйста, не кладите микроскоп в машину под палящим солнцем или близко к каким-либо источникам тепла, это может привести к повреждению.
6. Удалите пыль, грязь или влагу как можно скорее после использования, чтобы не попасть в микроскоп или в мобильный телефон.
7. Не разбирайте детали по своему желанию, это может привести к непредсказуемым повреждениям.

Аккумулятор

Пожалуйста, полностью прочтите инструкции и предупреждения перед использованием этого оборудования. Неправильное использование этого продукта может привести к повреждению продукта, перегреву, появлению токсичного газа, пожару или взрыву. Никогда не храните батарею в высокотемпературных средах, в том числе сильного солнечного света. Никогда не помещайте батарею в огне или другой перегретой среде.

- Запрещается ронять, толкать, изнашивать или выполнять другие действия, которые могут повредить аккумулятор. Если аккумулятор получил какие-либо из следующих повреждений, таких как вмятины, вздутия, перфорация, разрыв, деформация или коррозия и т. д. Независимо от того, как это немедленно прекратите его использование и обратитесь к производителю или передайте его в местный центр по переработке аккумуляторов для утилизации.
- Никогда не разбирайте аккумулятор, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор каким-либо образом.
- Не мочите аккумулятор и не погружайте его в жидкость. Всегда держите аккумулятор сухим.
- Не заменяйте какую-либо часть батареи (замените батарею полностью).

Батарея предназначена для использования взрослыми. Если покупатель намеревается использовать ее для несовершеннолетних, покупатель соглашается предоставить подробные инструкции и предупреждения перед использованием. Если это не сделано, покупатель несет полную ответственность, поскольку он согласен с оговоркой производителя об освобождении от ответственности за ненадлежащее использование / злоупотребление несовершеннолетними.

- Все батареи прошли строгий контроль качества. Если вы обнаружите, что батарея перегревается, появляется запах ненормальной формы, истирание, трещины или аномальные явления, немедленно прекратите использование всех батарей и обратитесь к производителю.
- Стандартная батарея является неперезаряжаемой батареей и не подлежит зарядке. Если не используется в течение длительного времени, выньте ее и храните отдельно.
- Не выбрасывайте аккумулятор в мусорный бак. В соответствии с условиями окружающей среды, законов и нормативных актов, незаконно Утилизируйте использованные батареи непосредственно в обычных мусорных баках. Пожалуйста, возьмите использованные батареи в местной батарее рециркуляции центр для утилизации.

Заявление от ответственности

Эта батарея должна быть использована только с соответствующим оборудованием. Пожалуйста, обратитесь к упаковке устройства, чтобы определить, если это совместимо с вашим конкретным устройством. Производитель не несет ответственности за любые повреждения оборудования, вызванные использованием этого продукта. Производитель не несет никакой ответственности ни в какой форме, включая любой ущерб вам или любой третьей стороне, который вы или любая третья сторона можете причинить из-за использования, будь то намеренное, непреднамеренное или неправильное использование этой батареи в сочетании с любым оборудованием или аксессуарами. Производитель не несет ответственности за любые убытки, которые могут быть вызваны неправильным использованием этой батареи вами или любым третьим лицом, как описано выше.

ВНИМАНИЕ

- Не смотрите на солнце или другой яркий свет с вашими продуктами или даже невооруженным глазом, в противном случае, может быть необратимым повреждением глаз.
- Детей нужно использовать под опекой взрослых, чтобы избежать ненужных повреждений.
- Не кладите пластиковую упаковку в недоступное для детей место. В противном случае дети могут засунуть пластиковую упаковку в рот и задохнуться.

Уход и Чистота:

Изделие не требует регулярного обслуживания, кроме как следить за чистотой линз объективов и очков. Грязные объективы или очки означают меньшее пропускание света и потерю яркости, а также нечеткие изображения. Держите оптику в чистоте! храните их в предусмотренном футляре.

Уведомление об использовании:

1. Храните продукт в проветриваемом, сухом, чистом месте или кладите в сухой ящик.
2. Если на оптическом объективе есть пыль и другие загрязнения, воспользуйтесь профессиональным набором для очистки, чтобы очистить его. Не протирайте его тканью или жесткой щеткой.
3. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно, если вам необходимо его отремонтировать, обратитесь в наш профессиональный отдел послепродажного обслуживания.
4. Не используйте водонепроницаемые изделия во влажной среде, используйте водонепроницаемые изделия во влажных средах и сушите их после использования.
5. При просмотре в помещении, пожалуйста, не закрывайте окно и не смотрите через окно, это уменьшит эффект наблюдения за продуктом.

Избегайте опасности удушья

Мелкие детали. Не для детей младше 3 года.

Утвержденные аксессуары

Этот пункт отвечает нормативным стандартам при использовании аксессуаров Svbonu поставляемых или предназначенных для данного продукта. Список одобренных Svbonu аксессуаров для вашего устройства см. Вы можете связаться с нами.

Гарантийный талон	
Модель продукта	
Дата покупки	
Причина дефекта	
Имя дилера	
Имя пользователя	
Телефон	
Адрес пользователя	
Электронная почта	

Примечания:

1. Гарантийный талон должен храниться у пользователя и не подлежит замене в случае утери.
2. Гарантия производителя на большинство новых продуктов составляет один год со дня покупки.
3. Пользователь может получить гарантийное и послегарантийное обслуживание, как указано ниже: Свяжитесь с продавцом, у которого вы покупаете.
4. Для гарантийного обслуживания вам необходимо предоставить квитанцию о покупке от реального продавца для проверки.

Исключения из гарантийного покрытия:

1. К любому изделию, поврежденному случайно.
2. В случае неправильного использования или неправильного использования продукта, а также в результате несанкционированных изменений или ремонта.
3. Если серийный номер был изменен, стерт или удален.